
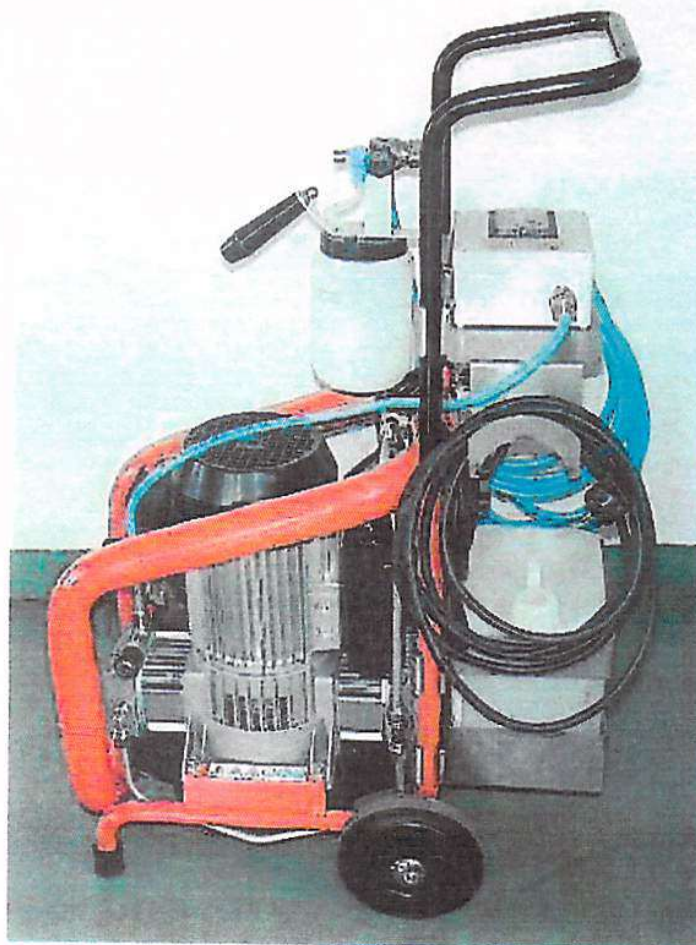


Efficace dans l'action Rapide
dans l'exécution Simple dans
l'utilisation


innovaSolutions

Manuel Fog-It® Système de désinfection

Fog-It®

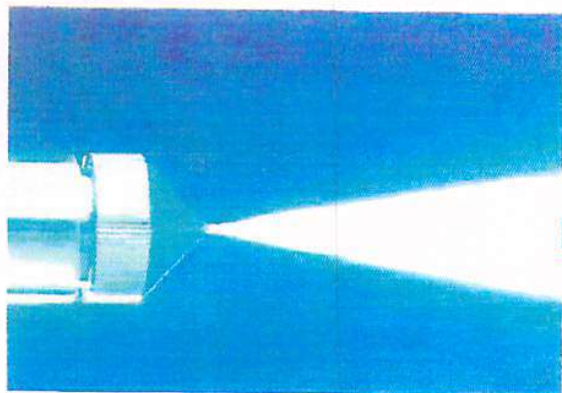

Pulvérisation très fine

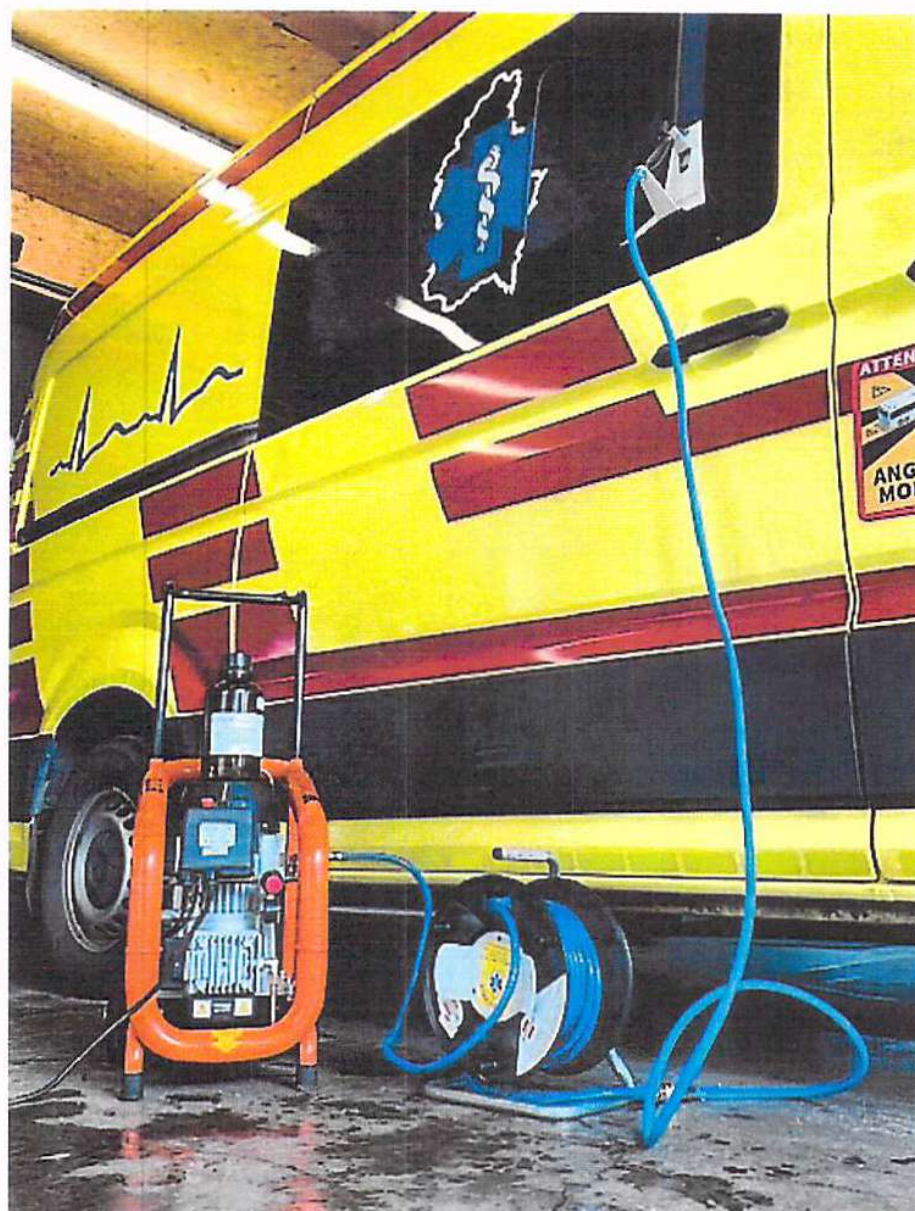

Introduction

Le système Fog-It a été développé en particulier pour les véhicules d'intervention des services de secours, de transport de malades, de transport de personnes handicapées, de taxis ainsi que pour les véhicules de transport de personnes en général.

Les désinfectants utilisés, Fog-It Q et Fog-It Plus, ainsi que le système Fog-It, ont été testés et approuvés par la Commission européenne. par indépendants institutions et laboratoires ont été testés et contrôlés positivement. La Société allemande d'hygiène et de microbiologie (DGHM) a répertorié les désinfectants mentionnés dans la liste VAH (Verband für Angewandte Hygiene). Vous trouverez les certifications dans l'annexe E (Fog-It Q) et F (Fog-It Plus).

L'application dans les hôpitaux et les cabinets médicaux est possible avec un autre système, de de notre site maison, également est possible, sera disponible sur mais sur dans ce Manuel non décrit.



Figure 6 Appareil de pulvérisation dans l'exemple du véhicule (en haut)



Figure 8 : pulvérisation en cours dans le véhicule.



Figure 7 Pulvérisation fine

11. Pénétrer dans la pièce, pendant la nébulisation ou si la pièce est se trouve encore (même si invisible) brouillard se trouve, en fait, uniquement possible avec l'équipement de protection prescrit.
12. Toujours attendre le temps d'action. Le brouillard dans la pièce se dissipe. Il ne doit pas y avoir de brouillard visible dans l'air ambiant. Ensuite, il faut aérer intensivement et il est possible de travailler régulièrement dans la pièce.

Anhang F VAH-Zertifikat für Fog-It Plus

Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

– Desinfektionsmittel-Kommission im VAH –
Disinfectant Commission in VAH

Zertifikat / Certificate

über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for conformity of efficacy tests for

Fog-It Plus

mit dem Anforderungskatalog der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) – Stand 4.2.2002 basierend auf den Standardmethoden der DGHM – Stand 1.9.2001 – bzw. den Übergangsbestimmungen vom 4.9.2002
DGHM und VAH bestätigen die Äquivalenz mit den früher herausgegebenen DGHM Zertifikaten
with the Requirements issued by the German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM) on February 4th 2002 which is based on the DGHM Standard Methods of September 1st 2001 or the transitional provisions of Sept. 4th 2002. DGHM and VAH confirm the equivalence to the former issued DGHM certificates

ANTRAGSTELLER / APPLICANT

Innova Solutions GmbH
Siemensstr. 6
88048 Friedrichshafen

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 ml:

Quantity of active substances per 100 ml:

300 mg Chlordioxid

Hiermit wird bestätigt, dass das obg. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten Anwendungsbereichen in folgenden Konzentration-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird.
This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the application domains listed below at the specified concentration/contact ratios:

Flächendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis (Bakterizidie und Levurozidie) Surface disinfection for prophylaxis in hospital and primary healthcare (bactericidal and yeasticidal)								
Wischen: Mechanical action		Organische Belastung Interfering substance		Einwirkzeit in min Contact time in min				
manuell	ohne without	gering/rein conditions	hoch/dirty conditions	5	15	30	60	240
	X		X		konz.			

Das Zertifikat ist gültig vom 09.01.2012 bis zum 09.01.2015 (3 Jahre) /
Certificate is valid from 09.01.2012 until 09.01.2015 (3 years)

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der Desinfektionsmittelkommission des VAH einverstanden erklärt und rechtserheblich bestätigt, dass das vor ihm in Handel gebrachte Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die Erstellung der Gutachten angegebenen Mustern ist.
The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules of the disinfectant commission in the VAH valid at the time of registration and has equally bindingly confirmed that the distributed product is identical with the product used for the activity testing.

Bonn, den 09.01.2012
Place/Date

Der Vorsitzende der / The President of the
Desinfektionsmittel-Kommission im VAH / Disinfectant Commission in VAH – Ident.Nr. N11/365

Desinfektionsmittel-Kommission im VAH – Friedrichshafen, c/o Innova Solutions GmbH, Siemensstr. 6, 88048 Friedrichshafen, Tel. 07141 9000-100, Fax 07141 9000-101, E-Mail: info@innova-solutions.de



Plaque du véhicule : _____

Méthode de désinfection :

[illegible]